



AnHydre.
Bleu Passionnément ...

Analyseur portable μ MacSmart

Systema

*Analyse des eaux,
rapide & précise sur site*



AnHydre. Sarl au capital de 9000 €

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN – France

Tel : +333 24 40 11 07 – Fax : +333 24 41 11 57

Vente France : 0811 60 08 08 – SAV France : 0825 66 30 40

SIRET 434 917 274 00012 APE 3320C www.anhydre.eu anhydre-vente@orange.fr



μ MAC SMART est un analyseur portable piloté par un PC intégré et contrôlé via l'écran tactile couleur, il est spécialement conçu pour la surveillance sur site des ressources en eau.

ROBUSTE & FIABLE

Cet analyseur est monté dans une valise plastique robuste et facile à porter, avec des compartiments pour les réactifs et autres accessoires. Un porte réactifs accueille tous les flacons des réactifs et autres solutions nécessaires aux méthodes.

FACILE A INSTALLER

Conçu pour simplifier les opérations, l'analyseur peut être utilisé sur site après une rapide prise en main. Il est livré d'usine totalement testé et prêt à être utilisé, des kits de réactifs sont disponibles pour toutes les mesures standards. Les résultats sont stockés en mémoire par l'analyseur, les données sont transférables via le port USB.

Le démarrage comme l'utilisation d'un analyseur n'ont jamais été plus simples! Mettez sous tension, insérez les réactifs, le logiciel convivial va vous guider au fil de toutes les étapes nécessaires.



CALIBRATION AUTOMATIQUE

La calibration est totalement automatisée, utilisez simplement la solution comme spécifiée dans le manuel et lancez la calibration. Le nouveau facteur de calibration est vérifié et acceptée si trouvé à l'intérieur des limites fixées comme acceptables.

MULTIPLES PARAMETRES

L'analyseur peut être livré prêts à de multiple mesures (versions MP) sur le même échantillon, plusieurs configurations sont proposées en standard.

MULTIPLES MESURES

L'analyseur offre l'option d'un mode opérationnel en continu, l'opérateur peut exécuter des mesures séquentielles manuelles ou laisser simplement l'analyseur en surveillance pendant l'écoulement de l'échantillon.

RE-ANALYSE SUR HORS GAMME

L'analyseur identifie les échantillons hors gamme puis exécute une nouvelle analyse après une dilution automatique.



AnHydre. Sarl au capital de 9000 Euros

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN - France

Tel : +333 24 40 11 07 – Fax : +333 24 41 11 57

Vente France : 0811 60 08 08 – SAV France : 0825 66 30 40

SIRET 434 917 274 00012

APE 3320C

www.anhydre.eu

anhydre-vente@orange.fr

Applications μ MacSmart

Plus de 50 applications différentes existent pour le μ MacSmart.

Les plus importantes sont: Ammonia, Phosphate, Nitrate+Nitrite, Nitrite, Silicates, Azote Total, Phosphore Total, DCO/COD (UV), DBO/BOD, Turbidité.

μ MacSmart peut être livré comme analyseur mono ou multi-méthodes (MP) qui applique jusqu'à 4 mesures séquentielles sur le même échantillon.

μ MacSmart-MP4 Nutriments :

Ammonia:	Fluorimétrie OPA
Phosphate:	Colorimétrie Molybdate – Acide ascorbique
Nitrate+Nitrite:	Colorimétrie Photoréduction en NO ₂ suivie de NED + SAA
Nitrite:	Colorimétrie NED + SAA

μ MacSmart-TN :

Azote total: Oxydation UV en NO₃ et lecture directe à 220nm

μ MacSmart-TP :

Phosphore total: Hydrolyse acide & oxydation UV, ortho-phosphates mesurés par Molybdate – Acide ascorbique

μ MacSmart-MP2-TN/TP :

Azote total: Oxydation UV, colorimétrie par photo-réduction en NO₂ suivie par NED + SAA
Phosphore total: Hydrolyse acide & oxydation UV, ortho-phosphates mesurés par Molybdate – Acide ascorbique

μ MacSmart-MP2-TN/NO₃:

Azote total: Oxydation UV en NO₃ et lecture directe à 220nm
Nitrate: Lecture directe à 220nm

μ MacSmart-MP3-TP/PO₄/NH₃:

Phosphore total: Hydrolyse acide & oxydation UV, ortho-phosphates mesurés par Molybdate – Acide ascorbique
Phosphate: Colorimétrie par Molybdate – Acide ascorbique
Ammonia: Fluorimétrie OPA

μ MacSmart ECO - COD UV:

Lecture directe SAC à 254nm, compensation de turbidité à 550nm suivant DIN 348404-3, corrélation DCO/COD par calibrant connu, cette version peut mesurer le COT/TOC en alternative à DCO/COD

μ MacSmart ECO - BOD (similaire au Tryptophan):

Mesure directe fluorimétrique (similarité Tryptophan), excitation à 280nm et émission à 360nm, corrélation DBO/BOD par calibrant connu Tryptophan, facteur de corrélation à confirmer / ajuster sur site

μ MACSmart - ECO MP3:

DCO/COD (UV) / DBO/BOD / Turbidité ISO 7027

Etc.

AnHydre. Sarl au capital de 9000 Euros

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN - France

Tel : +333 24 40 11 07 – Fax : +333 24 41 11 57


Vente France : 0811 60 08 08 – SAV France : 0825 66 30 40

SIRET 434 917 274 00012

APE 3320C

www.anhydre.eu

anhydre-vente@orange.fr

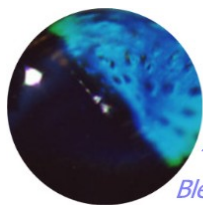


AnHydre.
Bleu Passionnément ...

Analyseur portable μ MacSmart

Systema

Principe μ MacSmart

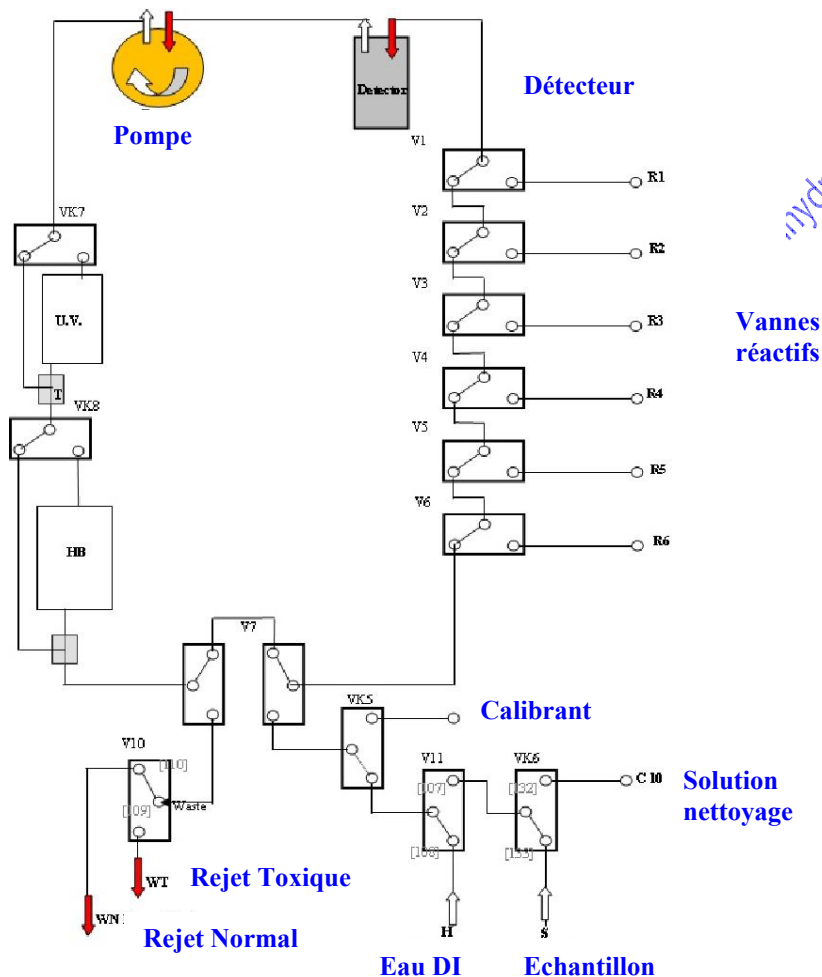

www.anhydre.eu - www.anhy

anhydre.eu - www.anhydre.eu

AnHydre. Sarl au capital de 9000 Euros

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN - France

Tel : +333 24 40 11 07 – Fax : +333 24 41 11 57

Vente France : 0811 60 08 08 – SAV France : 0825 66 30 40

SIRET 434 917 274 00012

APE 3320C

www.anhydre.eu

anhydre-vente@orange.fr

Données techniques μ MacSmart

Méthodes :

DCO/COD (UV) :	SAC à 254nm, correction de turbidité à 550nm – DIN348404-3 Corrélation DCO/COD sur calibrant connu
DBO/BOD Fluo :	Fluorimétrie (similarité Tryptophan), excitation 280nm, émission 360nm, Corrélation DBO/BOD par calibrant Tryptophan, ajustement et/ou application sur site
Turbidité (IR) :	Mesure à 850nm suivant ISO 7027, Option : corrélation TSS/MES en application sur site
Nitrates (UV) :	Lecture directe à 220nm, correction à 275nm

Principes :

Méthodes colorimétriques suivant la description de la méthode de référence

Gammes standards :

Ammonia :	0-0,3 – 0,5 – 1,0 – 2,0 – 5,0 – 10,0 mg/l N-NH ₃
Nitrate+Nitrite (colorimétrie) :	0,3 – 0,5 – 1,0 – 2,0 – 5,0 – 10,0 mg/l N-NO _x
Nitrate(UV) :	0-10 – 20 – 30 – 50mg/l
Nitrite :	0-0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,5 – 1,0 mg/l N-NO ₂
Phosphate :	0-0,3 – 0,5 – 1,0 – 2,0 – 5,0 mg/l P-PO ₄
Azote total (colorimétrie) :	0-2,0 – 5,0 – 10,0 – 20,0 mg/l N
Azote totale (UV) :	0-10 – 20 – 30 – 50 mg/l N
Phosphore total :	0-1,0 – 2,0 – 5,0 – 10,0 mg/l P
DCO/COD :	0-50 – 100 – 200 – 1000 – 2000 – 3000 mg/l
DBO/BOD :	0-20 – 50 – 100 – 500 mg/l
Turbidité :	0-20 – 50 – 100 – 500 – 1000 NTU

Types de mesure :

Ponctuelle, version MP : ponctuelle et multiple séquentielle

Fréquence :

Unique, séquentielle en continu sur intervalle programmable (MP)

Durée :

40/50 minutes (MP4 Nutriments) en fonction des gammes pour les 4 méthodes
40/60 minutes (TN & TP) en fonction des gammes
7-10 minutes (DCO/COD, DBO/BOD, turbidité)
Fonction de la gamme, de la température – 10-15 minutes sur versions combinées

Communication

USB

Alarmes :

Affichage à l'écran couleur, sur résultats des tampons

Réactifs :

Kits réactifs disponibles

Température :

Environnementale +10 à +35°C

Indice de protection :

IP 65 capot fermé

Informatique :

Microcontrôleur PC104, écran tactile couleur intégré 8''

Alimentation :

Externe en 12Vcc, adaptateur secteur fourni

Consommation :

4W en pause, 10W en analyse

Poids & dimensions:

7,7kg sans réactifs – 180mm x 460mm x 360mm (h x l x p)

Copyright © AnHydre 2014 – Caractéristiques modifiables sans préavis

AnHydre. Sarl au capital de 9000 Euros

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN - France

Tel : +333 24 40 11 07 – Fax : +333 24 41 11 57

Vente France : 0811 60 08 08 – SAV France : 0825 66 30 40

SIRET 434 917 274 00012

APE 3320C

www.anhydre.eu

anhydre-vente@orange.fr