



Sero'Box

Sérothèque Intelligente

Sero'Box ...Sérothèque intelligente

Faire le pari de l'innovation, c'est prendre des risques, mais c'est vous démarquer, en apportant toujours plus de valeur ajoutée aux services que vous proposez.

Préparer l'avenir en prenant, dès à présent, un temps d'avance.

Avec votre nouvelle sérothèque intelligente, c'est anticiper l'avenir sur la gestion optimisée du stockage de vos sérums biologiques.

Sero'Box est un outil indispensable dans la bonne gestion de votre sérothèque pour faire face aux nouvelles réglementations en vigueur, ainsi qu'aux démarches qualitatives et quantitatives pour l'accréditation de vos laboratoires.

La traçabilité est une de vos priorités dans le processus de l'accréditation.

Sero'Box vous permettra de tracer tous vos échantillons biologiques, du prélèvement à la destruction.

- 🌀 Produit conçu pour optimiser le stockage et la gestion de la sérothèque
- 🌀 Certification norme COFRAC NFX 15.140 – ISO 15.189
- 🌀 Grande capacité de stockage de 11.220 tubes à + 152.000 tubes
- 🌀 Sécurité de manipulation et gain de productivité
- 🌀 Gestion et contrôle des températures
- 🌀 Garantie la traçabilité de chaque tube, de chaque microplaque
- 🌀 Historique et statistiques complets de la sérothèque


Sero'Box ...Logiciel intégré

- 🌀 Logiciel simple et intuitif
- 🌀 Entièrement paramétrable
- 🌀 Recherche en multicritères
- 🌀 Alerte des tubes périmés dans la sérothèque
- 🌀 Traçabilité de toutes les actions réalisées
- 🌀 Option - gestion des températures en temps réel
- 🌀 Option - interface avec SIL/SGL/LIS



Stocker, rechercher et tracer en toute simplicité

Sero'Box... un logiciel simple et intuitif

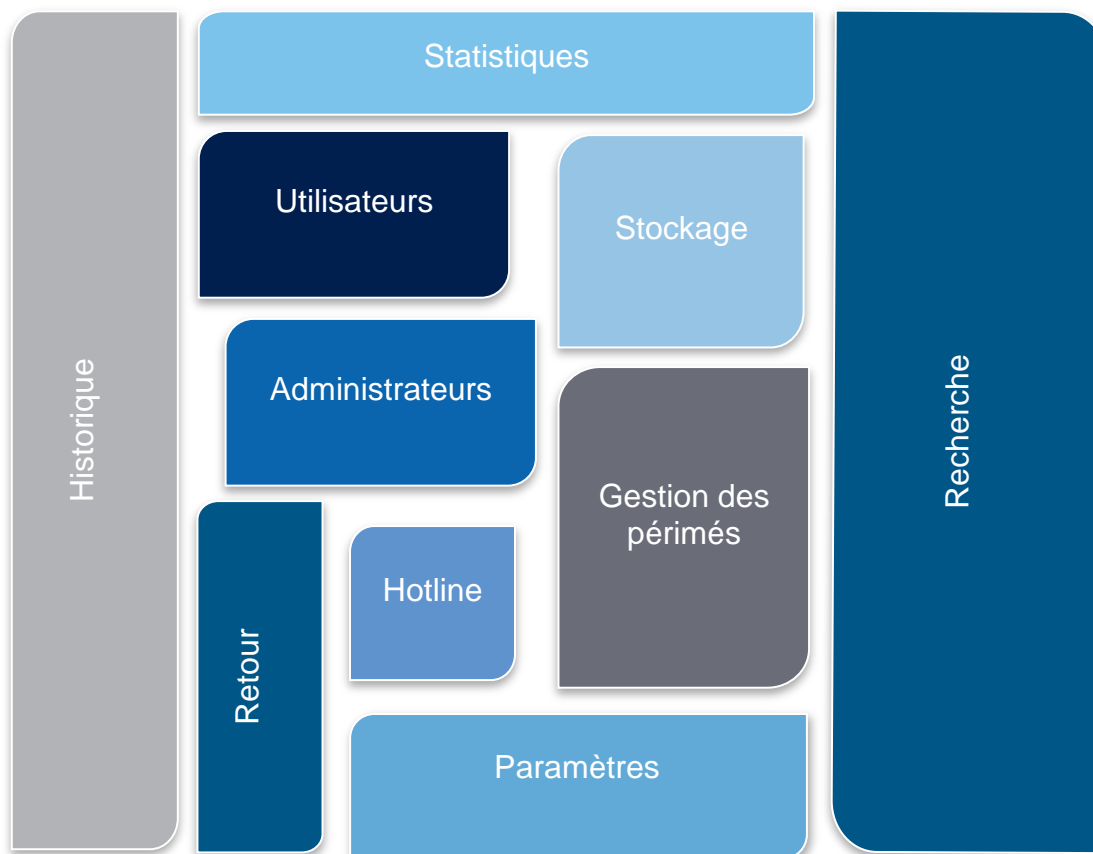

- 🌀 Notre logiciel intégré, Sero'Box, peut être modifié à façon, suivant votre cahier des charges.
- 🌀 La traçabilité peut être augmentée en fonction des besoins d'un service ou d'un établissement.
- 🌀 Les interfaces peuvent être développées en uni ou bi-directionnelles.
- 🌀 Notre application peut gérer un nombre important de réfrigérateurs, congélateurs et chambre froide, sur un site ou plusieurs sites.
- 🌀 Notre application est totalement modulable, modifiable et ultra performante répondant aux normes d'accréditations.
- 🌀 Notre logiciel peut être géré en Webservice.

Sero'Box... portoirs pour tubes primaires



Matériel médical professionnel
Plage de température +5°C à - 86°C
Etagères portes-tubes coulissantes
Grande capacité de stockage

Identification & recherche de tubes
ultra rapide et facile

Réfrigération ventilée
Régulation électronique
Alarmes sonores et visuelles

Ecran PC tactile 17"
Logiciel intuitif intégré
Lecteur scanette

Porte vitrée à triple cristal ou porte
pleine
Eclairage à LED

Systeme évolutif, sécurité d'emploi, faible encombrement

Traçabilité et sécurité

Sero'Box...un large choix

SB LF 2100 W PRO
2100 litres
33.660 à 138.040 tubes stockés



SB LF 1160 W PRO
1160 litres
22.440 à 92.160 tubes stockés



SB LF 530 W PRO
530 litres
11.220 à 46.080 tubes stockés



Tubes	SB LF 530		SB LF 1160		SB LF 2100	
Volume	530 L		1160 L		2100 L	
Températures	+5° à - 40°C		+5° à - 30°C		+5° à - 25°C	
Dimensions H x L x P mm	2100 x 750 x 700		2100 x 1500 x 700		2100 x 2250 x 820	
Tubes 0,5 à 2 ml Ø13 H<= 40 mm	20 pt.	22 440	40 pt.	44 880	60 pt.	67 320
Tubes 5 ml Ø13 H<= 75 mm, sans coiffe	12 pt.	13 464	24 pt.	26 928	36 pt.	40 392
Tubes 7 ml Ø13 H<= 110 mm	10 pt.	11 220	20 pt.	22 440	30 pt.	33 660
Tubes 1,4 ml Ø 9 H<= 45 mm	20 pt.	46 080	40 pt.	92 160	60 pt.	138 240

pt. = portoirs

Les données sont à titre indicatif, elles dépendent de la hauteur des tubes

Large Choix

Sero'Box ... microplaques SBS



Mini Scanner intégré pour lecture boîte code-barres 1D et les tubes data Matrix 2 D (96 ou 48 puits)

Chaque microplaque est identifiée et localisée suivant son lieu de stockage

Chaque boîte et chaque tube enregistrés sont tracés pour une durée définie

Recherche facilitée grâce au logiciel intégré ultra performant paramétrable

Microplaques 120 x 80 mm	SB LF 625		SB LF 1365		SB LF 2100	
Volume	625 L		1365 L		2100 L	
Températures	+5° à - 40°C		+5° à - 30°C		+5° à - 25°C	
Dimensions H x L x P mm	2100 x 750 x 820		2100 x 1500 x 820		2100 x 2250 x 820	
Tubes 1,4 ml Ø 9 H<= 45 mm – 96 puits	528 mp	50 688	1 056 mp	101 376	1 584 mp	152 064
Tubes 1,4 ml Ø 13 H<= 45 mm – 48 puits	528 mp	25 342	1 056 mp	50 688	1 584 mp	76 032

mp = microplaques ; 22 portoirs

*Les données sont à titre indicatif, elles dépendent de la hauteur des tubes

Une gamme complète

Sero'box ...Cryoconservation

SB ULF 650

Congélateur -86°C de 650 litres
 21.318 tubes stockés sur portoirs
 43.776 tubes stockés en microplaques



Visualisation des portoirs entre chaque porte intérieure



Tubes <= Ø 13 ou Microplaques 120 x 80 mm


	SB ULF 650	
Volume	650 L	
Températures	- 86°C	
Dimensions H x L x P mm	1980 x 1035 x 900	
Tubes 0,5 à 2 ml Ø13 H<= 45 mm pt. = portoirs	19 pt.	21 318
Tubes 1,4 ml Ø13 H<= 45 mm microplaques, 48 puits	456 mp	21 888
Tubes 1,4 ml Ø9 H<= 45 mm microplaques, 96 puits	456 mp	43 776

mp = microplaques

* Les données sont à titre indicatif, elles dépendent de la hauteur des tubes

Ultra basse température

Sero'Box ...Accessoires

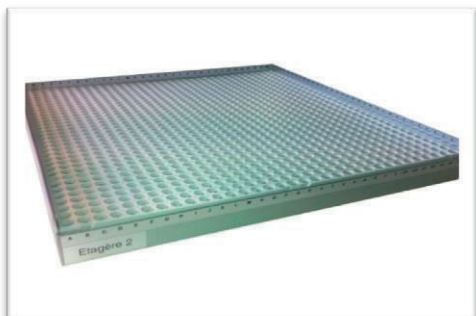

Portoirs coulissants, déclipsables, qui permettent de travailler sur paillasse. Peuvent être mis sur bâtis en chambre froide ou envoyés sur un autre site



Bâtis pour chambre froide avec plateaux coulissants et dé-clipsables
Différentes hauteurs
Configuration sur mesure



Mini Scanner intégré pour lecture boîte code-barres 1D et tubes data Matrix 2D (96 ou 48 puits)
Logiciel intégré paramétrable

Sero'Box ...présERVE l'environnement

*Utilisation de
gaz réfrigérants
écologiques,*

**CFC-HCFC
FREE**

*Utilisation des
produits de
technologie
verte*









*Produit
recyclable à
95%,*



*Réduction de la
consommation
électrique*



Votre Sero'Box sur-mesure

-  Nous concevons votre *Sero'Box sur-mesure en chambre froide*
-  Aménagement spécifique pour réfrigérateurs, congélateurs
-  Aménagement pour armoires réfrigérées à réactifs
-  Gestion et contrôle des températures
-  Garantie la traçabilité de vos échantillons biologiques
-  Audit et conseils dans l'organisation de votre sérothèque

Sero'Box répond aux accréditations de votre laboratoire



www.accsa-tech.com - www.sero-box.com

info@accsa-tech.com