


CHAMBRES STERILES MOBILIT EN SURPRESSION

- * Le MOBILIT ADS LAMINAIRE à flux laminaire vertical stérile permet la protection du malade contre les germes véhiculés par l'air ambiant.
- * D'implantation aisée, ne nécessitant aucune modification de la chambre où on l'installe,
- * le MOBILIT représente une solution économique et efficace.
- * Le malade se trouve dans une ambiance stérile, sans être isolé socialement du personnel hospitalier.

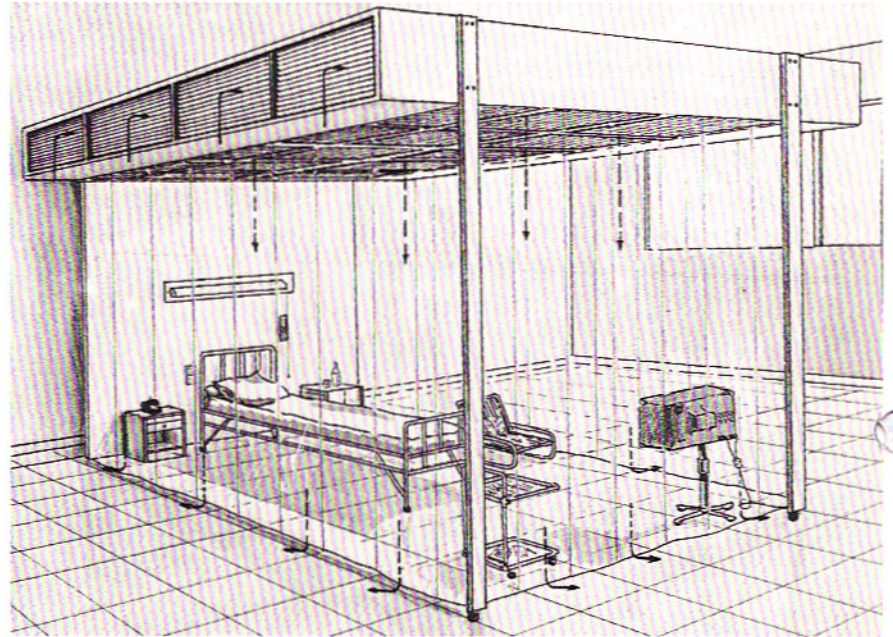

Dais à flux laminaire pour patient immuno-déficient

- * La construction, les ventilateurs, la préfiltration la filtration absolue, répondent aux normes de la classe 100 du FEDERAL STANDARD 209e
- * rideau en vinyle souple transparent, fixé à la périphérie du MOBILIT, permet de guider le flux d'air vers le sol et de concrétiser les limites de la zone protégée.
- * ISOLATION PHONIQUE RENFORCÉE par l'intermédiaire de mousse, de pièges à son, garantit un niveau sonore très bas inférieur à 48 Dba pour le confort du malade et du personnel hospitalier


DOMAINES D'UTILISATION

- * Service d'hématologie
- * Service des grands brûlés
- * Service de maladies infectieuses
- * Malades immuno-déficients

OPTIONS

- * Eclairage spécifique
- * Distribution de fluides médicaux
- * Prise de courant, et prise T.V.
- * Sonnerie, report alarme
- * Climatisation
- * Suspension au plafond

MOBILIT EN DEPRESSION

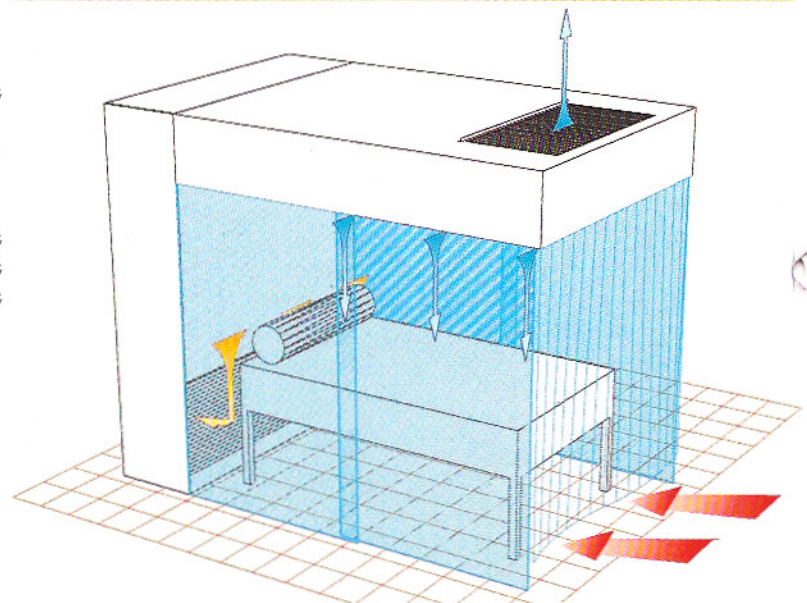

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU MALADE CONTAGIEUX: MOBILIT STERILE EN DEPRESSION

PRINCIPE

L'air stérile pulsé sur le malade est alors repris au niveau du lit dans un caisson d'aspiration garni de filtres absolus, dans lesquels viennent se fixer les particules contagieuses émises par le malade. L'ensemble du volume du MOBILIT est en dépression, une entrée d'air rasante au niveau du sol entraîne vers le caisson d'aspiration l'air contaminé et assure ainsi la protection de son entourage.

