

haze-gloss

La référence dans toutes les applications

Le brillancemètre haze-gloss fut développé pour les exigences spécifiques en laboratoire. Le brillant spéculaire, le voile de réflexion et la réflexion miroir peuvent tous être mesurés avec un seul appareil, pour des surfaces mates à très brillantes.

- Le brillant à 20°, 60°, 85° et le haze
- La réflexion miroir pour les matériaux avec un fort degré de réflexion, tels que les métaux par exemple
- Le faisceau de référence, une optique cloisonnée et l'autodiagnostic garantissent un contrôle qualité précis
- Statistiques avec valeur moyenne, mini/maxi et déviation standard
- Avec une grande capacité de mémoire et une connexion PC, vous êtes prêt pour l'ISO 9000

Mesures rapides de plusieurs échantillons

- Commande à pédale et dispositif motorisé porte-échantillons pour un échange rapide des échantillons
- Cible éclairée pour faciliter le positionnement des échantillons
- Pas de temps de préchauffage, fonctionnement immédiat
- Calibrage de longue durée et manipulation assistée par un menu – simple et sûr
- Affichage en allemand, anglais, français, espagnol et italien – modifiable facilement

Normes

ISO	2813, DIS 13803,
ASTM	D 523, E 430, D 2457
DIN	67530

Référence de commande

Réf.	Désignation
AG-4601	haze-gloss
SE-4601	Extension de garantie une année supplémentaire

Fournitures:

haze-gloss
étalons haut-brillant et voile de réflexion avec certificat
logiciel easy-link
câble d'interface
pédale
câble d'alimentation
mode d'emploi

Une maintenance préventive **gratuite** pendant la période de garantie.




Caractéristiques techniques

Brillant	
Gamme de mesure	0 - 2000 UB ¹
Répetabilité	0,2 UB ²
Reproductibilité	0,5 UB ²
Voile de réflexion	
Gamme de mesure	10 - 2500 UH ³
Répetabilité	1 UH*
Reproductibilité	7 UH*
Surfaces de mesure	20°: 15 x 15 mm (0.6 x 0.6 in) 60°: 15 x 27 mm (0.6 x 1.0 in) 85°: 8 x 60 mm (0.3 x 2.4 in)
Capacité de mémoire	9 x 600 valeurs
Interface	RS-232 série
Alimentation en courant	115 / 230 V; 50 / 60 Hz
Dimensions	33 x 52 x 40 cm (33 x 20.5 x 15.7 in)
Poids	14.3 kg (31.5 lbs)

¹ unités de brillant, ² 0 - 100 UB; ³ unités de voile de réflexion (Hlog);
* mesuré sur un étalon haut-brillant

Exploitation des données de mesure

Le programme de transfert des données "easy-link" permet un transfert vers Excel® pour une analyse approfondie et pour votre documentation professionnelle.

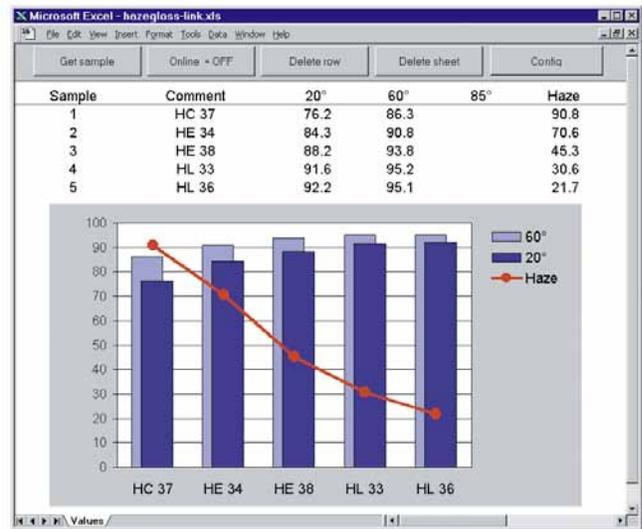

Référence de commande

Réf.	Désignation
AG-4616	Étalon de contrôle 20°
AG-4617	Étalon de contrôle 60°
AG-4618	Étalon de contrôle 85°
AG-4624	Étalon de réflexion spéculaire
AG-4614	Étalon haut-brillant
AG-4615	Étalon de voile de réflexion
AG-4623	Support
AG-4613	Câble d'interface
AG-4545	BYKWARE easy-link

Certifié

Pour le service d'étalonnage et de maintenance, voir pages 268 - 270.

Accessoires

étalon de contrôle noir semi-brillant, avec certificat
 étalon de contrôle noir semi-brillant, avec certificat
 étalon de contrôle noir semi-brillant, avec certificat
 étalon haut-brillant poli miroir pour 20°,60°,85°, avec certificat
 pièce de remplacement, étalon de calibrage brillant, avec certificat
 pièce de remplacement, étalon de calibrage voile de réflexion, avec certificat
 pour élargir la table porte-échantillon, 28 x 15 cm (11 x 6 in)
 pour le transfert de données à ordinateur et imprimante ; Prise 9 broches
 logiciel pour le transfert et la documentation des données dans Excel®

