

## Patients obèses



### **Harnais Ultra Sling, mod. 06**

Avec une capacité de 500 kg, Ultra Sling est conçu pour les patients les plus obèses. Ultra Sling s'utilise avec le système de lève-personnes UltraTwin de Liko et est disponible en plusieurs tailles. Avec le système UltraTwin, le patient peut facilement être positionné dans le harnais pendant le transfert.



### **Harnais Confort Plus, mod 300, 310**

Le harnais Confort Plus est une version plus récente du harnais Confort (mod. 30, 31) avec un confort et une coupe améliorés. Le harnais Confort Plus offre une position assise droite et un soutien pour tout le dos. Le harnais Confort Plus s'applique et s'enlève en position allongée. Il est ensuite laissé dans la chaise après le transfert. Le modèle 310 est pourvu d'une ouverture hygiénique.

## Modèles de base pour des transferts faciles et en toute sécurité



Mod 10

### Harnais Original Liko, mod. 10, 11

Le dos du harnais Original est à mi-hauteur, ce qui offre à l'utilisateur la possibilité de garder un bras, ou les deux, à l'extérieur du harnais. Le harnais original convient à l'utilisateur actif, il est simple et pratique à utiliser et offre une position assise confortable.



Mod 00

### Harnais Universel Liko, mod. 00, 02

Le harnais Universel est un modèle de base qui convient à la plupart des usagers. Le harnais Universel est parfait pour les personnes âgées à la mobilité réduite. Il offre une position assise droite, avec un soutien pour tout le dos. Le mod. 02 est une version qui donne une hauteur de levage supplémentaire.



Mod 20/26

### Harnais Original/ Harnais Original Soft à dos rehaussé, mod. 20, 26

Le harnais Original/ Harnais Original Soft à dos rehaussé offre une position assise renversée vers l'arrière avec soutien pour la tête et convient donc bien aux personnes dont la stabilité du tronc est mauvaise. Le harnais Original Soft à dos rehaussé a une coupe et un confort améliorés avec un soutien confortable pour la tête en position assise. Le harnais Original/ Harnais Original Soft est parfaitement adapté aux transferts vers/depuis le sol.



Mod 350/360

### Harnais Confort Plus Rehaussé, mod 350, 360

Le harnais Confort Plus Rehaussé est une version plus récente du harnais Confort (mod. 35, 36) avec un confort et une coupe améliorés. Le harnais Confort Plus Rehaussé offre une position assise légèrement renversée vers l'arrière et un soutien pour tout le dos. Il est équipé d'un soutien souple pour la tête. Le harnais Confort Plus Rehaussé s'applique et s'enlève en position allongée. Il est ensuite laissé dans la chaise après le transfert. Le modèle 360 est pourvu d'une ouverture hygiénique.



Mod 00

Le harnais Universel convient bien pour lever avec les soutiens de jambes croisés sous les deux jambes.



Mod 22

### Harnais Coquille, mod. 22

Le harnais Coquille offre une position assise renversée en arrière, avec un soutien confortable pour la tête. Il est spécialement conçu pour transférer vers des fauteuils roulants étroits et quand on veut laisser le harnais dans le fauteuil. Le harnais Coquille est fin et souple, sans poignées ni renforcements.

## Transfert vers les toilettes

Modèles qui permettent d'habiller/de déshabiller pendant le transfert.



Mod 41



Mod 45/46

### Harnais Culotte, mod. 40, 41, 45, 46

Le harnais Culotte est un harnais de levage simple et facile à utiliser, qui facilite le déshabillage et le rhabillage lors des transferts vers les toilettes. Le harnais Culotte convient aux personnes qui ont une certaine stabilité du corps.

Le harnais Culotte mod. 41 est équipé d'une ceinture et a une coupe améliorée.

Le harnais Culotte mod. 45 est équipé d'une ceinture de sécurité qui soulève autour du corps pour une sécurité accrue.

Le modèle 46 est, en plus de la ceinture de sécurité, également pourvu d'un soutien plus haut pour le dos.



Mod 50



Mod 55

### Harnais Hygiène Liko, mod. 50, 55

Le harnais Hygiène est un harnais de levage unique, conçu spécialement pour transférer les personnes au tonus musculaire faible vers les toilettes, d'une façon sûre et sécurisante. Le harnais hygiène offre une position assise droite, avec une prise ferme autour de la partie supérieure du corps en laissant une grande partie du siège accessible pour l'habillage et le déshabillage.

Le harnais Hygiène mod. 55 est équipé d'un soutien pour la tête.

## Harnais jetable Solo



Mod 25

### Harnais jetable Solo

Pour répondre au besoin de harnais pour des patients particuliers, et comme un moyen d'éviter le processus du nettoyage, Liko a développé une série de harnais de type jetable. Le harnais Solo à dos rehaussé convient à la plupart des usagers et peut être utilisé pour toutes les situations courantes de transfert.

## Personnes amputées



Mod 70

### Harnais Amputation Liko, mod. 70, 75

Le harnais Amputation a une coupe particulière, avec un guide de bande supplémentaire qui empêche les soutiens de jambes de s'écarter l'un de l'autre. Nous recommandons le harnais Amputation pour les personnes amputées en haut des deux jambes ou pour d'autres personnes qui ont besoin de cette sécurité supplémentaire. Le harnais Amputation est disponible en deux hauteurs de dos: le mod. 70 (image) offre un soutien jusqu'à hauteur d'épaule et le mod. 75 offre également un soutien pour la tête.

## Pour le soutien et la sécurité en position debout



Mod 60, 64



Mod 60



mod 64



mod 92

### Le Harnais-Veste Liko, mod. 60 et 64

Le Harnais-Veste facilite la verticalisation d'une personne qui peut s'appuyer sur ses jambes. Le Harnais-Veste est un moyen judicieux pour l'entraînement à se tenir debout, à la marche, et les exercices d'équilibre. Lors des transferts vers les toilettes, la partie inférieure du corps est laissée libre pour le désabillage et l'habillage.

Le Harnais-Veste avec fermeture ventrale, mod. 64, donne la possibilité à l'utilisateur de fermer et d'ouvrir sa veste lui-même. L'Entrejambe est un accessoire et est disponible en tailles pour adultes et enfants.

### Culotte de levage Liko, mod. 92

Avec la Culotte de levage Liko, l'utilisateur peut s'entraîner à la marche en toute sécurité. La sécurité donne le courage d'oser un peu plus.

La Culotte de levage donne la liberté de se mouvoir avec plus ou moins de décharge du poids du corps. Elle soulève de façon sûre et permet à l'utilisateur de marcher et de se mouvoir sans risque de tomber.

## Sensibles aux pressions



Mod 10

Pour les utilisateurs particulièrement sensibles aux pressions, la plupart des modèles sont disponibles avec doublure de peau de mouton synthétique. La doublure a un renforcement qui, au besoin, peut être retiré.

## Filet polyester – une alternative aérée



Mod 00

Le filet polyester est un matériau qui convient à un harnais qu'on laisse autour de l'utilisateur après le transfert. Le matériau est aéré, solide, et est disponible dans la plupart des modèles.

Les harnais en filet polyester peuvent également être utilisés pour le bain et la douche.

## Bain et Douche



Mod 00

Pour les transferts vers le bain ou la douche, il existe plusieurs modèles en filet de plastique ferme, qui n'absorbe pas l'eau et est donc agréable à porter, même lorsqu'il est mouillé.

# Assortiment, tailles adultes

Article n°.	Designation du modèle	<div style="display: flex; justify-content: space-between; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Universel Liko avec hauteur supplémentaire de levage</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Universel Liko</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Ultra</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Original Liko</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Original Liko à dos rehaussé</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Coquille Liko</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Original Soft Rehaussé</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Original Liko</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Original Liko à dos rehaussé</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Coquille Liko</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Original Soft Rehaussé</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Confort Plus</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Confort Plus avec ouverture hygiénique</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Confort Plus Rehaussé</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Colorte Liko</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Colorte Liko avec ceinture de sécurité</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Colorte Liko</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Colorte avec ceinture de sécurité</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Colorte Liko avec fermeture ventrale</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Colorte Liko</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Colorte Liko à dos rehaussé</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Colorte Liko</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Colorte Liko à dos rehaussé</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Harnais Colorte Liko</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Colorte de Levage Ultra</div> </div>																										
		00	02	06	10	11	20	21	22	25	26	300	310	350	360	40	41	45	46	50	55	60	64	67	70	75	92	920
35---4	Small	●													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
35---5	Medium Slim	●				●		●		●	●																	
35---5	Medium	●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
35---6	Large	●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
35---7	XLarge	●			●		●		●	●	●	●	●	●		●	●								●	●		
35---8	XXLarge						●				●								●	○	●	●				●		
35---9	XXXLarge																		●								●	
35---14	Short			●																								
35---15	Regular			●																								
35---16	Long			●																								
35--11-	Polyester	●	●	●	●	●	●	●			●							○		●	●	●	●	●	●	●	●	
35--21-	Coton	●			○	○	○	○				●		●											○	○		
35--31-	Filet polyester	●	○	●	●	●	●	●	○		○	●	●	●	●	○									●	●		
35--41-	Filet plastique	○	○		○		●	○				●	●	●	○							●	●		○	○		
35--12-	Doublure, Polyester	●	○		●	●	●	●								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
35--13-	Polyester, Manchester				○											●	●	●	●	○								
35--22-	Doublure, Coton	○			○		○	○								○												
35--32-	Doublure, Filet polyester	○	○		○	○	○	○	○																		●	●
35--10-	Polyester	○			●	●	●	●																				
35--20-	Coton	○			●		●									○												
35--30-	Filet polyester	●	○		●	●	●	●	●																	○		
35--40-	Filet plastique	●	○		●	●	●	●	○							○										○	○	
35--60-	Filet polyester, fin	○			○		○	○	●																			
	Pour les transferts vers les toilettes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Soutien de tête incorporé						●	●	●	●	●			●	●					●			●			●		
	Harnais jetable									●																		

- = En stock
- = A commander

La plupart des accessoires de levage sont en stock et peuvent être livrés immédiatement.  
Les articles qui doivent être commandés sont livrés sous 4 semaines.

## Accessoires de levage



### Alaise Repo Original

L'Alaise Repo Liko est un excellent moyen pour retourner ou déplacer les usagers vers la tête du lit. L'Alaise Repo se place sous l'usager et peut être utilisée sans le drap de dessous ordinaire ou combinée avec.



### Etrier Croisé

L'étrier Croisé donne une position assise un peu plus penchée vers l'arrière qu'un étrier deux fixations et convient très bien à beaucoup de harnais de l'assortiment. L'étrier Croisé est disponible en deux modèles différents.



### Oeillets de rallonge

Les oeillets de rallonge Liko sont conçus pour pouvoir adapter l'accessoire rapidement et facilement. Deux longueurs sont disponibles: pour 12 respectivement 22 cm de rallonge d'un oeillet de sangle ordinaire. Disponibles en vert et gris.



### Manchons rembourrés


Nous appelons ainsi les étuis qui peuvent être achetés en option pour tous nos harnais. Ils sont équipés de peau de mouton synthétique d'un côté et du matériau en tissu de l'autre. Indiquez à la commande à quel harnais (modèle, taille et matériau) le manchon de rembourrage doit s'adapter.



### LikoScale


Un pèse-personnes à écran numérique qui peut s'utiliser avec tous les lèves-personnes Liko. Il s'accroche au-dessus de l'étrier, est simple à utiliser et facile à lire. LikoScale est disponible pour la pesée des personnes jusqu'à 350 kg.

## Etriers Universel

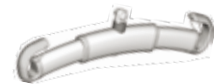

### Etrier Universel 350

Un modèle qui est particulièrement apprécié pour lever les enfants.

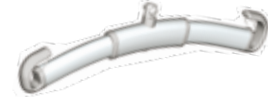


### Etrier Universel 450

Le modèle complet qui convient à la plupart des cas.



### Etrier Universel 670 Twin

Un étrier pour les usagers plus corpulants ou lorsqu'on souhaite une plus grande largeur aux épaules.

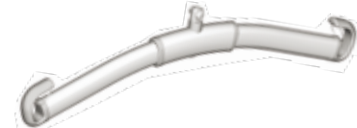

### Etrier Universel 600

Cet étrier convient avant tout aux harnais Confort ou lorsqu'on veut accrocher un harnais aux soutiens de jambes fendus « croisés » sous les jambes.



### Etriers Latéraux

S'utilisent quand on veut arriver à une suspension quatre fixations pour une position semi-assise. Se combine généralement avec l'étrier Universel 450 ou 600.

Voir d'autres accessoires sur notre site internet [www.liko.com](http://www.liko.com)



[www.liko.com](http://www.liko.com)

#### Fabricant :

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå  
Suède  
[info@liko.se](mailto:info@liko.se)

#### Distributeur en France :

SAS Liko France  
ZA du Haut Serroir BP7,  
FR-54690 Lay Saint Christophe  
Phone: +33 (0) 3 83 22 82 32  
Fax: +33 (0) 3 83 22 82 38  
[info@liko-france.fr](mailto:info@liko-france.fr)


#### Distributeur en Suisse :

Liko Care AG  
Bannstraße 1,  
CH-4124 Schönenbuch  
Phone: +41 (0) 6 14 82 22 22  
Fax: +41 (0) 6 14 82 19 23  
[info@liko.ch](mailto:info@liko.ch)

 **Liko**  
A  Company

# Accessoires de levage

Harnais pour adultes

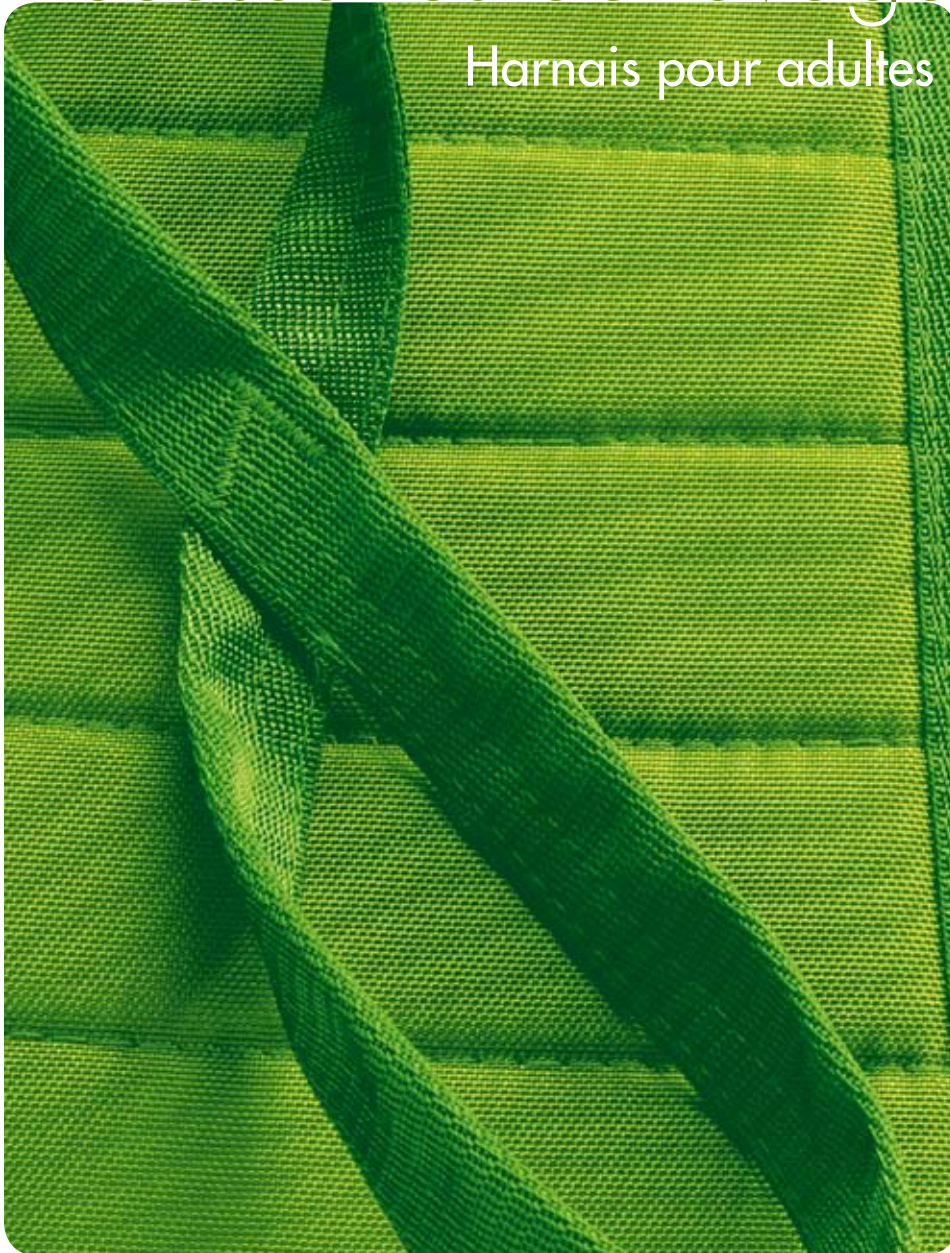

# Les accessoires de levage Liko

*Tout a commencé avec un harnais de levage tout en textile. Une petite révolution à l'époque. Liko a aujourd'hui le plus grand assortiment du monde de harnais et d'accessoires. Combinés avec nos nombreux modèles d'étriers de différentes largeurs et aux différentes fonctions, les harnais offrent la possibilité de lever dans toutes les situations.*

*Depuis plus de 25 ans, nous avons développé des accessoires fonctionnels et faciles à utiliser, en collaboration avec les utilisateurs et les usagers. Au fur et à mesure que les connaissances et les besoins dans ce domaine augmentent, Liko poursuit son travail de développement.*

## De nombreux modèles

Chaque modèle a des caractéristiques uniques pour s'adapter à des besoins différents. Nous appelons certains d'entre eux des modèles de base, car ils couvrent un besoin plus grand et peuvent lever différentes personnes, d'autres modèles étant davantage spécialisés, pour être optimaux dans un domaine d'utilisation plus étroit.

## Harnais de levage pour enfants

Les enfants ne sont pas de petits adultes. Nous avons un large assortiment de harnais conçus spécialement pour les enfants. Consultez nos brochures spéciales d'accessoires pour les enfants ou visitez notre site internet pour de plus amples informations.

## Essai individuel

Pour atteindre un maximum de sécurité et de confort pour l'utilisateur et l'assistant, chaque accessoire de levage doit être essayé individuellement.

## Tailles

Il est de la plus grande importance pour la sécurité, la fonctionnalité et le confort, de choisir la bonne taille. Chaque modèle a des tailles individuelles, voir le tableau "Assortiment".

## Notice d'emploi

Une notice d'emploi accompagne chaque harnais. Elle doit être lue par tous ceux qui utilisent les produits.

On trouve entre autres dans la notice d'emploi un guide des étriers qui conviennent le mieux à chacun des harnais.

## Marquage

Sur les harnais se trouve une étiquette décrivant le modèle, la taille et la variété. S'y trouvent également des conseils de lavage et la charge maximale du harnais.

## Contrôle

Les harnais doivent être considérés comme un produit de consommation à durée de vie limitée. L'utilisation et le lavage usent le tissu et les coutures du harnais.

Tous les accessoires doivent être contrôlés régulièrement. N'utilisez pas d'accessoires abîmés!

Les harnais Liko sont testés par un institut accrédité et sont conformes à toutes les normes MDD pour les produits de classe I; ils sont également conformes aux normes du standard harmonisé EN ISO 10535.