

POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE I



CARACTERISTIQUES :

- Mise en route d'un seul «clic»
- Poste à poser sur paillasse
- Structure bois latté stratifié
- Filtre absolu HEPA H 14
- Eclairage
- Recyclage total dans le local
- Visière rabattable (en verre sécurit)
- Maintenance par l'avant
- Régulation automatique (moteur à courant continu, faible consommation électrique et faible niveau sonore)
- Affichage LCD (vitesse, colmatage, alarmes...)

Conforme à la norme : EN 12469

DOUBLE PROTECTION OPERATEUR ET ENVIRONNEMENT

Les hottes en dépression sont destinées à **protéger le manipulateur** et son **environnement proche** de toute aérocontamination grâce à un système d'aspiration verticale et de filtration absolue.

Les LAM sont particulièrement recommandées pour les manipulations de germes pathogènes et/ou manipulations de produits chimiques (acides, solvants, alcool....)

UTILISATIONS:

- Pharmaceutique
- Chimie
- Hôpitaux
- Biotechnologie
- Agroalimentaire
- Electronique
- Etc...

MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE ASSUREES PAR LE CONSTRUCTEUR ADS LAMINAIRE





PRINCIPE:

La protection du manipulateur et de l'environnement est assurée par la dépression du volume de travail sur filtre absolu HEPA (H14).

La vitesse frontale d'aspiration (≥ 0.7 m/s) permet une reprise homogène et complète de toutes les particules.


Le recyclage est total dans le local, ce qui évite un raccordement vers l'extérieur.




Exemple de LAM 121 en vis-à-vis

OPTIONS:

- Structure inox
- Piètement avec plan de travail
- Préfiltres
- Raccordement vers l'extérieur
- Lampe UV
- Filtre à charbon actif*
- Compteur horaire*
- Poste en vis-à-vis *
- *(hors norme EN 12469)

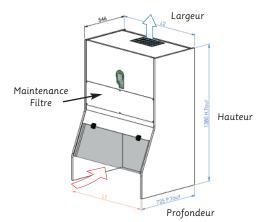

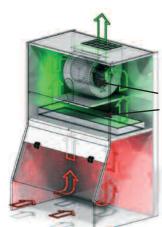

Ventilateur Filtre absolu



	LAM 6		LAM 9		LAM 12	
Dimensions (mm)	Utiles	Hors tout	Utiles	Hors tout	Utiles	Hors tout
Largeur	625	659	930	964	1235	1269
Hauteur	Utile: 547 Hors tout: 1380 Sous flux: 723					
Profondeur standard/vis-à-vis	Utile: 681 Hors tout: 725 / Utile et Hors tout: 878					
Poids total (kg)	90 kg		120 kg		150 kg	

Documents:

Les documents suivants sont remis à la livraison : • certificat de conformité

- certificat de garantie
- livret d'utilisation en Français