



c-max —
le monte escalier universel

monter et descendre les escaliers en toute sécurité

c-max

www.aat-online.de



Ideen bewegen mehr



La mobilité est un facteur important de votre qualité de vie. Les escaliers ne doivent pas constituer un obstacle à vos déplacements.

Le monte escalier électrique c-max, vous permet d'être mobile partout et à tout moment, à la maison comme à l'extérieur.

Le c-max vous permet de franchir sans effort et confortablement des escaliers étroits à l'intérieur comme à l'extérieur.

Grâce à sa cinématique brevetée, le c-max assure la translation verticale sur les marches; la personne accompagnante manipule le c-max avec un minimum d'effort.

Le c-max est léger et se démonte rapidement. Il se transporte facilement et peut donc vous accompagner lors de tous vos déplacements.



Le mécanisme breveté du c-max le rend sûr et maniable

Pour une plus grande mobilité
avec le c-max vous franchissez les escaliers
sans effort et en sécurité à la maison
et partout ailleurs.



Une technologie innovante, le c-max est adapté à vos besoins

Sécurité, fonctionnalité et confort. Pour réaliser ces caractéristiques nous avons développé des solutions, notamment la cinématique de montée, système breveté qui assure un franchissement d'escaliers en douceur et en sécurité. Le c-max a une capacité maximale de 120 Kg. Il existe cependant une version 160 Kg pour les personnes plus corpulentes.





Escaliers raides, étroits ou en colimaçon - le c-max est polyvalent et franchit des marches de maximum 21 cm (en version standard)

Le c-max est équipé de freins de sécurité sur les roues qui l'arrêtent automatiquement en bord de marche. Les jambes d'appui se positionnent près de la contremarche. Elles n'endommagent pas le nez de marche, assurent un bon appui et réduisent le déplacement du centre de gravité lors du changement d'appui.

Le c-max est particulièrement maniable sur tout type de revêtements: bois, métal, marbre, PVC ou tapis. Les grandes roues et les jambes d'appui permettent même de monter certains escaliers métalliques à claire voie.

La vitesse est réglable en cours d'utilisation pour s'adapter aux escaliers. Il est possible d'utiliser le c-max en fonction « marche par marche » ou « continue ».



Les poignées sont réglables individuellement en hauteur, selon la taille de l'utilisateur et assurent une position optimale.



Pratique, le c-max est prêt à l'emploi



Le c-max se range facilement
dans le coffre d'une voiture

Les poignées réglables en hauteur et la commande ergonomique rendent le c-max particulièrement facile à utiliser. Une bonne tenue de l'appareil assure une sécurité d'utilisation. La vitesse est réglable à tout moment pour s'adapter à la situation rencontrée.

Le pack batterie est démontable et peut se recharger sur toute prise de courant avec le chargeur de batterie fourni.



Une solution complète et une gamme d'accessoires adaptée

Le c-max est livré avec l'assise, le pack batterie et le chargeur de batteries. Il est utilisable instantanément.

Il existe une gamme d'accessoires pour répondre à vos besoins spécifiques.

Il est possible d'augmenter la hauteur de marche franchissable de 1,5 cm pour atteindre 22,5 cm.

Il existe une version 160kg (poids maximal transportable).

Accessoires* du c-max



appui tête



chargeur
allume-cigare




accoudoirs élargis



ceinture 5 points



ceinture ventrale

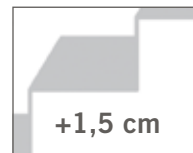

augmentation de la
hauteur de marche


Le c-max est le fruit de notre savoir faire et d'une longue expérience

Nous, chez AAT, recherchons constamment des solutions pour augmenter votre confort de vie. Le monte escalier électrique c-max fait partie intégrante de cette philosophie.

Notre connaissance résulte d'une longue expérience acquise depuis de nombreuses années dans le développement de motorisations de fauteuils roulants et de monte escaliers électriques. Le c-max présente les points forts suivants:

- des jambes d'appui au lieu de roues pour une meilleure stabilité
- utilisable comme fauteuil roulant à pousser
- construction solide pour une capacité de 120 Kg
- pas de dégradation des escaliers
- bonne maniabilité sur la plupart des escaliers
- utilisable sur presque tous les revêtements
- poids réduit et démontable
- commutateur «marche par marche»
- vitesse réglable



 Le c-max satisfait aux normes EU 93/42 pour les aides techniques.

Sous réserve de modifications.

Données techniques

capacité maximale	120 kg / 160 kg (renforcé)
vitesse de montée	8 — 23 marches par minutes
autonomie	15 — 30 étages (suivant la charge)
largeur (en mm)	485 / 440 (sans accoudoirs)
profondeur (en mm)	915 / 930 (repose pied replié)
hauteur (en mm)	1090
batteries	2 x 12V / 5 Ah
voltage	24 V
poids du pack batteries	4,4 kg
poids du bloc moteur	17,2 kg
poids assise	4,6 kg
poids dossier	4,3 kg
poids accoudoirs	1,2 kg
hauteur de marche	21 cm / 22,5 cm



Ideen bewegen mehr

Euromove Belgique
45 rue du Hameau
BE 1640 Rhode St Genèse
Tel.: 02.358.59.86
Fax: 02.358.59.51
info@euromove.be
www.euromove.be

Euromove France
10 avenue de la Créativité
FR 59650 Villeneuve d'Ascq
Tel.: 0800.86.30.61
Fax: 00.322.358.59.51
info@euromove.fr
www.euromove.fr